


NÁVOD NA OBSLUHU - REBOOTS ONE PRO



REBOOTS ONE PRO

INŠTRUKCIE PRED POUŽITÍM

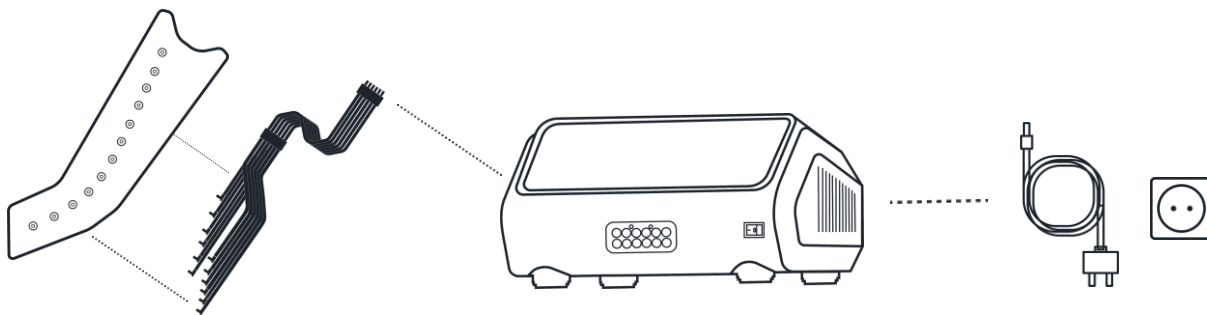

1

PRIPOJTE HADICOVÝ SYSTÉM K NÁVLEKOM

Pripojte hadice ku konektorom na návlekoch. Uistite sa, že najdlhšia hadica je pripojená ku komore na chodidle.

Pozn: Odporúčame, aby ste konektory po zapojení neodpájali.

2

PRIPOJTE HADICOVÝ SYSTÉM K RIADIACEJ JEDNOTKE

Na bočnej strane konektora sa nachádzajú dve svorky. Stlačte svorky a následne zasuňte konektor do riadiacej jednotky.

Pozn: Kolíky na konektore zasuňte do otvorov, ktoré sa nachádzajú nad vzduchovými výstupmi.


3

PRIPOJTE NAPÁJACÍ ZDROJ K RIADIACEJ JEDNOTKE

Pripojte napájací zdroj k riadiacej jednotke aj k zásuvke, aby ste zabezpečili napájanie.

Pozn. Z hygienických dôvodov odporúčame pri aplikácii Reboots nosiť legíny. Návleky úplne zapnite, aby ste zabránili náhlemu otvoreniu. Dávajte pozor, aby ste počas používania neprehýbali hadice.

OBSLUHA A DOPLNKOVÉ FUNKCIE

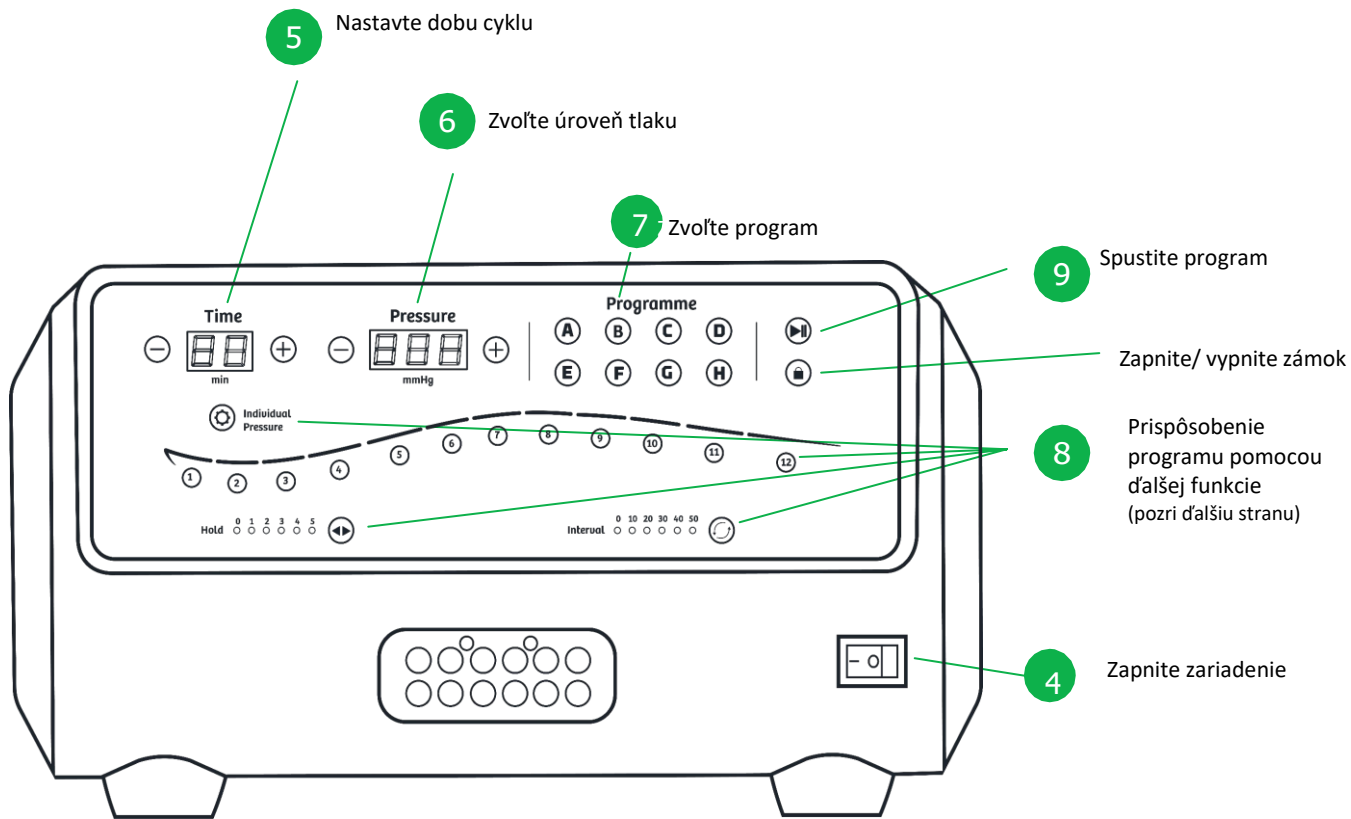

8

DEAKTIVÁCIA VZDUCHOVÝCH KOMÔR

- ak chcete deaktivovať jednotlivé komory, stlačte číselné tlačidlo pod komorou
- vzduchová komora sa deaktivuje, keď sa číselné tlačidlo pod komorou prestane rozsvetovať

1 - 12

8

NASTAVENIE TLAKU V JEDNOTLIVÝCH KOMORÁCH (INDIVIDUÁLNY TLAK)

- nastavte požadovaný tlak pre každú zvolenú komoru
- túto funkciu aktivujte podržaním tlačidla (kým nezačnú blikať všetky číselné tlačidlá pod komorami)
- vyberte požadovanú komoru a zvolte požadovaný tlak
- tieto kroky zopakujte pre každú komoru podľa potreby
- dlhým stlačením tlačidla uložte nastavenia
- blikajúca ikonka potvrdzuje, že ste úspešne aktivovali funkciu



8

NASTAVENIE INTERVALOVÉHO ČASOVAČA (INTERVAL)

- nastavte čas pauzy medzi dvoma masážnymi intervalmi
- intervalový časovač sa spustí po skončení časovača podržania (HOLD) posledného masážneho intervalu komory (komôr) akéhokoľvek programu
- dobu trvania možno nastaviť v rozsahu 0-50sec v 10-sekundových intervaloch stlačením tlačidla



8

NASTAVENIE ČASOVAČA PODRŽANIA (HOLD = PODRŽANIE)

- udržiajte požadovaný tlak počas zvolenej doby trvania v aktívnej komore
- časovač podržania (HOLD) sa spustí, keď sa dosiahne cieľový tlak v komore
- dobu trvania možno nastaviť v rozsahu 0-5 sec v 1-sekundových intervaloch stlačením tlačidla



PROGRAMY

MASÁŽNE PROGRAMY A-H:

Vzduchové komory v návlekoch sa nafúknu na základe zvoleného programu. Tým sa vytvára optimálna a uvoľňujúca kĺzavá tlaková masáž na oboch nohách. Počas masáže možno okrem voliteľných doplnkových funkcií nastaviť aj dobu trvania a tlak.

ZASTAVENIE A DEMONTÁŽ

Po uplynutí nastaveného času alebo po stlačení vypínača vytiahnete konektor z riadiacej jednotky. Ak sa počas masáže necítite dobre, môžete zariadenie kedykoľvek vypnúť. Po vypnutí môžete návleky otvoriť. Ak chcete po aplikácii rýchlo vyfúknuť vzduchové komory, stlačte ich oboma rukami.

Sivé hadice môžete nechať natrvalo pripojené ku konektorom na návlekoch. Na uskladnenie položte návleky (vrátane hadíc) na seba a voľne zrolujte.

Návleky môžete čistiť vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Návleky nechajte dôkladne vyschnúť.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

UNIKÁ VZDUCH (POČUTEĽNE)

1. Skontrolujte, či nie sú hadice a konektory poškodené alebo prekrútené, čo by mohlo spôsobiť zadržiavanie vzduchu.
2. Skontrolujte, či je konektor správne zasunutý v riadiacej jednotke.

RIADIACA JEDNOTKA SA NEZAPÍNA

1. Skontrolujte, či je napájací zdroj správne zasunutý v riadiacej jednotke a zapojený do zásuvky.
2. Ak sa riadiaca jednotka stále nezapína, odpojte napájací zdroj. Otočte riadiacu jednotku a pomocou skrutkovača odstráňte držiak poistky s označením "FUSE" (poistka) na spodnej strane riadiacej jednotky. Skontrolujte, či je poistka vo vnútri neporušená.
3. Ak je poistka neporušená, zaskrutkujte ju úplne naspäť do zariadenia a kontaktujte zákaznícky servis alebo predajcu. Ak je poistka poškodená, vymeňte ju za komerčne dostupnú tenkú drôtovú poistku (pomalé nafúkanie (TR); 3.15A; 5x20mm).

NÁVLEKY SA NAFÚKAJÚ V NESPRÁVNOM PORADÍ

1. Skontrolujte, či je konektor zapojený v riadiacej jednotke správnym smerom. Konektor je správne zasadený, ak sú kolíky konektora vložené v otvoroch nad vzduchovými výstupmi.

RIADIACA JEDNOTKA JE NEOBVYKLE HLUČNÁ

Neobvykle hlučná znamená, že počas používania nie ste schopní viesť rozhovor alebo relaxovať, alebo že úroveň hlasitosti zariadenia presahuje 75 dB.

1. Môže sa to stať aj vtedy, ak nebola odstránená bezpečnostná skrutka, ktorá bola súčasťou dodávky počas prepravy. Bezpečnostnú skrutku pri preprave zvyčajne odstránime pred doručením, ak ju však vaše zariadenie stále má, môžete ju ľahko odstrániť sami.
3. Ak to chcete urobiť, otvorte kryt na spodnej strane a potom odstráňte a zlikvidujte prepravnú skrutku.

OBSAH BALENIA A TECHNICKÉ ÚDAJE



Riadiaca jednotka




Napájacie zariadenie



Návleky na nohy



Hadicový systém s konektormi

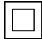Počet programov	8
Počet komôr	12
Váha [kg]	~ 5
Výkon [W]	78
Sieťová frekvencia [Hz]	50 / 60
Napätie [V]	AC220-240
Nastavenie časovača [min]	5-99
Výkon kompresora [l/min]	20-25
Tlak [mmHg]	30-240
Rozmery [cm]	30 x 25 x 16
Trieda ochrany	II/ 
Teplotný rozsah [°C] (použitie a skladovanie)	10-40
Vlhkosť [%] (použitie a skladovanie)	30-85
Poistka	T 0,315 A H

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste! Prístroj nerozoberajte ani nepáľte. Opravy riadiacej jednotky môžu vykonávať len odborníci autorizovaní spoločnosťou Wellcosan GmbH, inak môže dôjsť k strate záruky. V prípade poškodenia jednotky vyťahnite sieťovú zástrčku a vypnite jednotku. Sieťovú zástrčku vyťahnite a vypnite aj v prípade, že jednotka prišla do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Prístroj nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach. Uistite sa, že jednotka je bezpečne uložená. Zariadenie Reboots Go a najmä zabudovanú batériu nevystavujte nárazom. Jednotka nesmie byť počas prevádzky zakrytá inými predmetmi. Dbajte na to, aby sa hadice počas používania a skladovania neskrútili alebo nepretáčali. Prístroj uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla (napr. priame slnečné svetlo, radiátory a iné). Ak prístroj nepoužívate, musí byť vypnutý. Jednotka sa sama vypne po 10 minútach nečinnosti.

Keď sa prístroj nepoužíva a/alebo keď je batéria úplne nabitá, odpojte ho aj od elektrickej siete. Nikdy nestláčajte ani neprepichujte zabudovanú batériu. Zariadenie Reboots Go uchovávajte mimo dosahu detí alebo osôb, ktoré neboli poučené o jeho používaní.

ZÁRUKA

Na riadiacu jednotku poskytujeme záruku 24 mesiacov. V prípade poruchy môže byť potrebné zaslať jednotku na kontrolu. V takom prípade sa uistite, že prepravný kartón je vhodne vystlaný, aby sa zabránilo možnému poškodeniu pri preprave. Žiaľ, na závady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej prepravy, nie je možné uplatniť záručné nároky. **Záručné podmienky:** Pokiaľ existuje zákonná povinnosť poskytnúť záruku, bude buď poskytnutá bezplatná výmena, alebo bude výrobcovi poskytnutá možnosť odstrániť závadu, s vylúčením práva na odstúpenie od zmluvy alebo jej skrátenie. Ak sa odstránenie závad napriek niekoľkým pokusom nepodarí alebo ak je aj náhradný prístroj chybný, za čo zodpovedá výrobca, zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy alebo na zníženie ceny. Na záruku sa **nevzťahujú** chyby spôsobené násilným poškodením, nesprávnou prevádzkou, vonkajšou silou alebo úpravami a opravami tretích strán, ako sú chyby spôsobené nesprávnymi dimenzovanými alebo skratovanými poistkami alebo chyby spôsobené bežným opotrebovaním. **Záručné požiadavky:** Nárok na záruku je možný iba s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Preto si doklad o kúpe uschovajte na bezpečnom mieste.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok ohľadom používania nás neváhajte kontaktovať.

t.č. +421 907 573 597 (Pavel Šimko, Mgr.)
pavel.simko@gmail.com

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Kontraindikácie môžu zahŕňať: dekompenzované srdcové zlyhanie, poruchy srdcového výdaja s vodou v nohách, zápal ošetrovaných častí tela, známa alebo predpokladaná trombóza žíl dolných končatín, zápal žíl a tepien, gangréna, dermatitída, arterioskleróza alebo poruchy žilového obehu, otvorené, neošetrené alebo infikované rany a poranenia, pri bolestiach nôh, kožných léziách, akútnych zápaloch, zhubných nádoroch, pľúcnom edéme, hypertenzii, rozsiahlej tromboflebitíde, trombóze alebo podozrení na trombózu, erysipele, ťažkej nekontrolovanej hypertenzii, akútnej traume mäkkých tkanív končatín, neuropatii alebo okluzívnych procesoch v lymfatickom drenážnom systéme.

UPOZORNENIE:

Reboots Product nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určená na samoliečbu. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojim lekárom.

VÝROBCA:

Wellcosan GmbH, Hauptstraße 2736381,

Schlüchtern, Nemecko

© Wellcosan GmbH 2022

KONTAKT (SK):

Tel.: +421 907 573 597 (Pavel Šimko, Mgr.)

e-mail: pavel.simko@gmail.com

web: www.reboots.sk

